




# 產品使用說明書

電子體重計(家庭用) BNG-207


# 電池安裝方式

※ 本機所附電池為試用電池，使用時請拔掉電池絕緣片，電池電量不足時請更換。


**1** 打開電池蓋

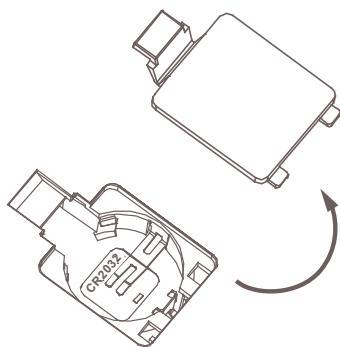

**2** 裝入電池(1顆CR2032)

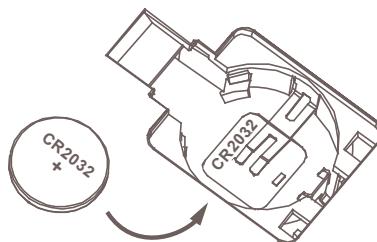

# 操作方式

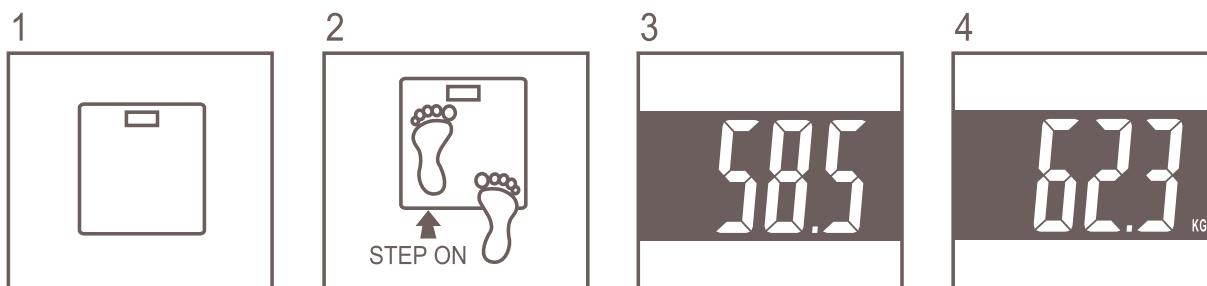

直接上秤量測


- 1 產品關機狀態
- 2 使用者直接站上秤體量測（請避免不必要之晃動）
- 3 顯示體重（仍在量測中，請勿下秤）
- 4 顯示秤重結果



測量完成 5 秒後產品將自動關機

# 使用安全注意事項

01. 請勿讓幼童接觸本產品。
02. 請勿在產品上跳躍。
03. 請勿踩在主機邊緣或顯示螢幕上。
04. 請勿讓體障人士在無人協助下使用本產品，若需使用產品時，請利用扶手輔助支撐，或請旁人協助站上秤體，以策安全。
05. 請勿拆解、自行修改或改裝本產品結構或顯示螢幕。
06. 請使用本產品指定的電池規格，切勿將電池電極反裝。
07. 長時間不用本產品時(三個月或以上)，請卸下電池。
08. 若開機後無螢幕顯示畫面，請先檢查是否為電池無電量或未裝電池。
09. 雙腳潮濕或磅秤表面潮濕，請勿踩踏使用，以避免滑倒造成危險。
10. 請勿將產品放在可能受潮的高度潮濕環境，化學品或具腐蝕性氣體的環境中，或受到陽光直射、空調冷氣直吹、高溫的火焰暖爐旁。
11. 本產品為精密儀器，請勿掉落重摔、震動或以外力撞擊。
12. 請勿用水清洗或苯、汽油、塗料稀釋劑、酒精或以其他揮發性溶劑擦拭本產品。
13. 請勿將本產品放置於非平面環境使用(如地毯或蓆墊等)。在非平面情況下可能導致產品無法準確
14. 測量，故請置放於平整地板上量測。  
測量前請先脫鞋及脫襪，再站上本產品。
15. 本產品和廢棄電池的處理，應遵循國內對電子產品的處理規定。
16. 請勿在顯示螢幕或機體附近使用行動電話。

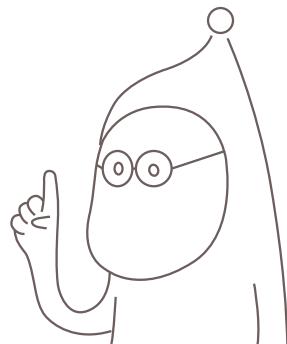




# 存放方式與保養

存放注意重點：

- 請存放在陰涼平整的地面。
- 避免放置在進出走道上，以免不小心絆倒行人。
- 不可直接浸泡到水。
- 遠離高溫、潮濕，直接日曬與多塵地方。
- 避免與化學材料或具腐蝕氣體存放一起。
- 長時間不使用時(三個月以上)，請取出電池裝入外盒收存。

保養小叮嚀：

- 每日使用前請用乾布擦拭，常保機器潔淨如新。
- 使用乾淨軟布擦拭秤盤與螢幕面板，必要時可使用擰乾後的布擦拭機器，最後再以乾布抹乾即可。
- 請勿使用揮發油、清潔劑或汽油來擦拭機器。
- 避免使用粗糙、有沾黏異物的布擦拭機器，以防秤盤與螢幕面板刮傷。
- 使用時，若發現機器沾到水，請儘快用乾布擦拭乾淨，避免讓水滲入機心，影響準確度。

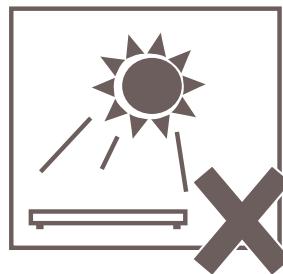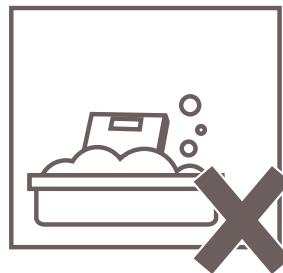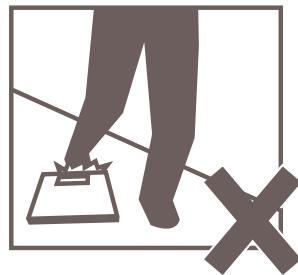

# 錯誤訊息顯示

---



電池電量過低  
請更換電池。



請重新量測一次。



過載。



稱重不穩定。

若上述狀況在嘗試歐瑟若提供的狀況排除方式以後仍存在，請連繫  
歐瑟若客服中心為您服務。 服務專線電話: 0800-203-766

# 產品規格

型號	oserio 電子體重計BNG-207系列
電池	1顆 CR2032 (3V鋰電池)
產品重量	1.1 kg
產品尺寸	機體：280(長) x 270(寬) x 22(高) mm LCD顯示器：27(長) x 60(寬) mm
適用環境	使用溫度：5 ~ 35°C      使用濕度：30 ~ 85%RH
保存環境	保存溫度：-20 ~ 60°C      保存濕度：10 ~ 95%RH
秤重準確度	5~150kg (±1%)
顯示項目	重量：5~150kg，遞增數值(解析度):100g

公司地址：台中市大里區國中路103號

服務專線電話：(04)24079943 0800-203766

[www.oserio.com](http://www.oserio.com)